


REANIMADOR MANUAL EM SILICONE ADULTO PADRÃO ROMED

RMS: 81284390011

Bolsa-válvula-máscara (ambu)

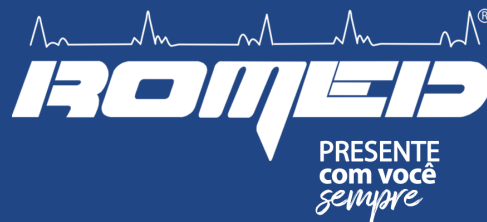

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5968	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO PADRÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5951	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO PADRÃO

Os reanimadores PADRÃO, são compostos por balão em silicone translúcido, válvula inferior e unidirecional confeccionadas em policarbonato/polissulfona, máscara em silicone e reservatório em PVC. Além de excelente qualidade e durabilidade, os reanimadores PADRÃO Marca ROMED, oferecem eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os manipulam. Os reanimadores manuais Padrão AMBU são utilizados para fazer a ventilação artificial mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões no caso de pacientes com parada respiratória, transferência de pacientes entubados e também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

DESCRIÇÃO

Os Reanimadores Manuais Padrão da Romed são autoclaváveis a 121°C ou 134°.

Balão produzido em silicone de grau farmacêutico de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, os reanimadores Padrão garantem excelente durabilidade, eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os utilizam.

Todos os modelos de Reanimador Manual Padrão Romed, possuem máscaras em silicone Autoclavável a 121°C ou 134°.

FINALIDADE

Os reanimadores manuais Padrão, têm como finalidade promover a ventilação artificial, mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões, no caso de pacientes com parada respiratória ou transferência de pacientes intubados. Também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

CARACTERÍSTICAS

Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização.

Máscara em Silicone

Válvula unidirecional em PC/PSU

Volume do balão: 1600ml adulto

Extensão em PVC 2 metros

Reservatório em PVC: 2500ml Adulto

Bolsa para transporte



(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5954	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO
RO5956	RESERVATÓRIO PVC AD 2500 ML REANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1094	EXTENSÃO REANIMADOR PVC O2



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5959	VÁLVULA UNIDIRECIONAL REANIMADOR PADRÃO/BARAKA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5961	VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR PADRÃO/PLUS



PACOTE COM 10 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5992	KIT C/ 10 PÇS DIAFRAGMA 18MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR

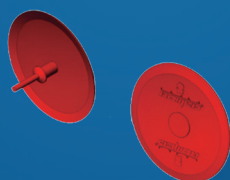

PACOTE COM 10 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5993	KIT C/ 10 PEÇAS DIAFRAGMA 46MM VÁLVULA INFERIOR REANANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1257	KIT C/ 3 DIAFRAGMAS P/ VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4569	KIT C/10 DIAFRAGMA P/ VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO/BARAKA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1057	MÁSCARA SILICONE Nº 4 REAN/ANEST ADULTO

As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adulto 4 fabricadas pela Romed, são compostas por cúpula confeccionada em policarbonato (PC) e coxim em silicone translúcido. Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed.

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1053	MÁSCARA SILICONE Nº 0 REAN/ANEST PREMATURO
RO1054	MÁSCARA SILICONE Nº 1 REAN/ANEST NEO
RO1055	MÁSCARA SILICONE Nº 2 REAN/ANEST INF
RO1103	MÁSCARA VNI SILICONE Nº 3 REAN/ANEST INF
RO1102	MÁSCARA VNI SILICONE Nº 4 REAN/ANEST AD.
RO1101	MÁSCARA VNI SILIC. Nº 5 REAN/ANEST AD. GDE



As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adultos (números 3, 4 e 5) fabricadas pela Romed, são totalmente em silicone macio, sendo mais confortáveis à face dos pacientes.

As máscaras faciais em silicone indicadas para pacientes prematuros, neonatal e infantil (números 0, 1 e 2) são confeccionadas totalmente em silicone macio, com perfeita adequação à face do paciente.

Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5958	BOLSA P/TRANSPORTE REANIMADOR

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br