

REANIMADORES MANUAIS SILICONE PLUS II COMPLETO

RMS: 81284390011

Bolsa-válvula-máscara (ambu)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5977	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO PLUS II	RO5978	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL PLUS II	RO5979	REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL PLUS II

REANIMADORES MANUAIS PLUS II SILICONE AUTOCLAVÁVEIS

Os reanimadores manuais PLUS II 100% autoclaváveis a 121° ou 134°C. Além de excelente qualidade e durabilidade, oferecem eficiência em reanimação e praticidade ao profissional que o manipula, permitindo um giro de 360°. Possui balão confeccionado em silicone de grau farmacêutico de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização. Balão 1600ml adulto. Acompanha máscara com coxim inflável em silicone Adulto ou Infantil ou Balão 500ml infantil. Válvula unidirecional e reservatório em silicone 2300ml adulto e 1000ml INF/NEO.

DESCRIÇÃO

Os Reanimadores Manuais Plus II da Romed são totalmente autoclaváveis a 134°C.

Balão e reservatório produzidos em silicone de grau farmacêutico de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, os reanimadores Premium garantem excelente durabilidade, eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os utilizam.

FINALIDADE

Os reanimadores manuais Plus II (AMBU) são utilizados para fazer a ventilação artificial mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões no caso de pacientes com parada respiratória, transferência de pacientes entubados e também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

CARACTERÍSTICAS

Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização

Máscara em silicone

Válvula unidirecional em PSU

Reservatório em silicone: 2,3 Litros Adulto
Reservatório em silicone: 1 L Infantil/Neonatal
Volume do balão: 1600ml adulto
Volume do balão: 500 ml infantil
Volume do balão: 250 ml neonatal
Extensão em PVC 2 metros
Bolsa para transporte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Volume do balão de silicone: Adulto – 1600ml
- Máscara de silicone
- Reservatório em silicone: 2,3 litros (Adulto)
- Volume do balão de silicone: Infantil – 500ml
- Máscara em silicone
- Reservatório em silicone: 1 litro (Infantil/Neonatal)



(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS OPCIONAIS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4933	RESERVATÓRIO REANIMADOR SILICONE 2,3L ADULTO
RO4934	RESERVATÓRIO REANIMADOR 1L SILICONE INF/NEO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1094	EXTENSÃO REANIMADOR PVC O2



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1035	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO II/PLUS ADULTO
RO1093	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO II/PLUS INF/NEO



PACOTE COM 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1154	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS SILICONE BICO DE PATO P/ REANIMADOR PADRÃO II/PLUS



PACOTE COM 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4607	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS P/VÁLVULA SUPERIOR EXT. REANIMADOR PADRÃO II/PLUS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5961	VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR PADRÃO/PLUS



PACOTE COM 10 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5992	KIT C/ 10 PCS DIAFRAGMA 18MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR

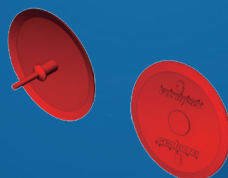

PACOTE COM 10 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5993	KIT C/ 10 PEÇAS DIAFRAGMA 46MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1257	KIT C/ 3 DIAFRAGMAS P/ VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1052	Suporte válvula PEEP (DIVERter) P/Ambu



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1050	Válvula PEEP 5-20 CM H ₂ O

VÁLVULA PEEP

A Válvula PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final) em policarbonato (PC) e mola com carga ajustável de 5 a 20 cm H₂O. Indicada para utilização em sistema CPAP/EPAP ou Ressuscitador Manual, com a finalidade de manter uma pressão positiva pré-determinada ao final da expiração.

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1059	MÁSCARA SILICONE Nº 00 REAN/ANEST PREMATURO
RO1053	MÁSCARA SILICONE Nº 0 REAN/ANEST/VNI PREMATURO
RO1054	MÁSCARA SILICONE Nº 1 REAN/ANEST/VNI NEONATAL
RO1055	MÁSCARA SILICONE Nº 2 REAN/ANEST/VNI INF
RO5982	MÁSCARA SILICONE Nº 2 REAN/ANEST/VNI INF C/ GARRA
RO1103	MÁSCARA SILICONE Nº 3 REAN/ANEST/VNI INF/ADOLESC
RO1102	MÁSCARA SILICONE Nº 4 REAN/ANEST/VNI ADULTO
RO1101	MÁSCARA SILICONE Nº 5 REAN/ANEST/VNI ADULTO GDE

As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adultos (números 3, 4 e 5) fabricadas pela Romed, são totalmente em silicone macio, sendo mais confortáveis à face dos pacientes.

As máscaras faciais em silicone indicadas para pacientes prematuros, neonatal e infantil (números 0, 1 e 2) são confeccionadas totalmente em silicone macio, com perfeita adequação à face do paciente.

Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5958	BOLSA P/ TRANSPORTE REANIMADOR



(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br