

REANIMADORES MANUAIS PLUS SILICONE AUTOCLAVÁVEIS



REANIMADOR MANUAL PLUS ROMED

RMS: 81284390011

bolsa-válvula-máscara (ambu)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4840	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO PLUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4841	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL PLUS

Os reanimadores manuais PLUS 100% autoclaváveis a 121° ou 134°C. Além de excelente qualidade e durabilidade, oferecem eficiência em reanimação e praticidade ao profissional que o manipula, permitindo um giro de 360°. Possui balão confeccionado em silicone de grau farmacêutico de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização. Balão 1600ml adulto. Acompanha máscara com coxim inflável em silicone Adulto ou Infantil ou Balão 500ml infantil. Válvula unidirecional e reservatório em silicone 2300ml adulto e 1000ml INF/NEO.

DESCRIÇÃO

Os Reanimadores Manuais Plus da Romed são totalmente autoclaváveis a 134°C.

Balão e reservatório produzidos em silicone de grau farmacêutico de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, os reanimadores Premium garantem excelente durabilidade, eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os utilizam.

FINALIDADE

Os reanimadores manuais Plus (AMBU) são utilizados para fazer a ventilação artificial mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões no caso de pacientes com parada respiratória, transferência de pacientes entubados e também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

CARACTERÍSTICAS

Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização
Máscara em PSU com coxim inflável em silicone
Válvula unidirecional em PSU
Reservatório em silicone: 2,3 Litros Adulto
Reservatório em silicone: 1 L Infantil/Neonatal
Volume do balão: 1600ml adulto
Volume do balão: 500 ml infantil
Extensão em PVC 2 metros
Bolsa para transporte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Volume do balão de silicone: Adulto – 1600ml
- Máscara com coxim inflável em silicone
- Reservatório em silicone: 2,3 litros (Adulto)
- Volume do balão de silicone: Infantil – 500ml
- Máscara com coxim inflável em silicone
- Reservatório em silicone: 1 litro (Infantil/Neonatal)

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS OPCIONAIS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4933	RESERVATÓRIO REANIMADOR SILICONE 2,3L ADULTO
RO4934	RESERVATÓRIO REANIMADOR 1L SILICONE INF/NEO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1094	EXTENSÃO REANIMADOR PVC O2



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1035	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO II/PLUS ADULTO
RO1093	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO II/PLUS INF/NEO



PACOTE COM 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1154	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS SILICONE BICO DE PATO P/ REANIMADOR PADRÃO II/PLUS



PACOTE COM 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4607	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS P/VÁLVULA SUPERIOR EXT. REANIMADOR PADRÃO II/PLUS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5961	VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR PADRÃO/PLUS



PACOTE COM 10 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5992	KIT C/ 10 PCS DIAFRAGMA 18MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR

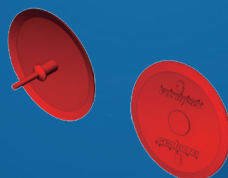

PACOTE COM 10 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5993	KIT C/ 10 PEÇAS DIAFRAGMA 46MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1257	KIT C/ 3 DIAFRAGMAS P/ VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1052	Suporte válvula PEEP (DIVERter) P/Ambu



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1050	Válvula PEEP 5-20 CM H ₂ O

VÁLVULA PEEP

A Válvula PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final) em policarbonato (PC) e mola com carga ajustável de 5 a 20 cm H₂O. Indicada para utilização em sistema CPAP/EPAP ou Ressuscitador Manual, com a finalidade de manter uma pressão positiva pré-determinada ao final da expiração.

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria




@Romedoficial

www.romed.com.br

MÁSCARA PARA ANESTESIA E REANIMAÇÃO COXIM INFLÁVEL EM SILICONE AUT. 134°C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1126	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILICONE AD.4 REAN/ANEST
RO1127	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILICONE AD.5 REAN/ANEST
RO1128	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILICONE INF.3 REAN/ANEST
RO1191	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILOBE.6 REAN/ANEST/VNI

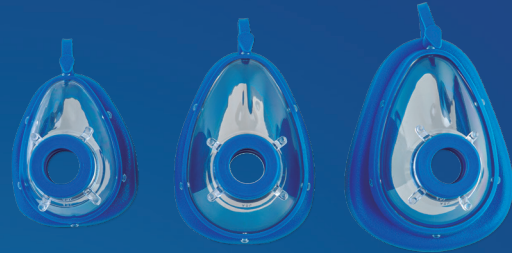

MÁSCARA COM COXIM INFLÁVEL EM SILICONE

As máscaras com coxim inflável em silicone são totalmente autoclaváveis a 134°C. Compostas por cúpula confeccionada em policarbonato (PC) e coxim inflável em silicone. Pode ser utilizada em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed.

A Máscara com Coxim Inflável em Silicone é completa e totalmente intercambiável em quaisquer produtos de fabricação Romed e com quaisquer outros produtos, de outros fabricantes, que possuam conector cônico normatizado conforme ABNT NBR ISO 5356-1.

FINALIDADE

A máscara com coxim inflável em silicone é indicada para auxiliar nos procedimentos de anestesia, reanimação e ventilação não invasiva (VNI).

CARACTERÍSTICAS

Bojo confeccionado em PSU;

Coxim inflável em silicone

Pressão para inflar o coxim (máxima) 65mmHg \pm 5mmHg



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5958	BOLSA P/ TRANSPORTE REANIMADOR



(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br