


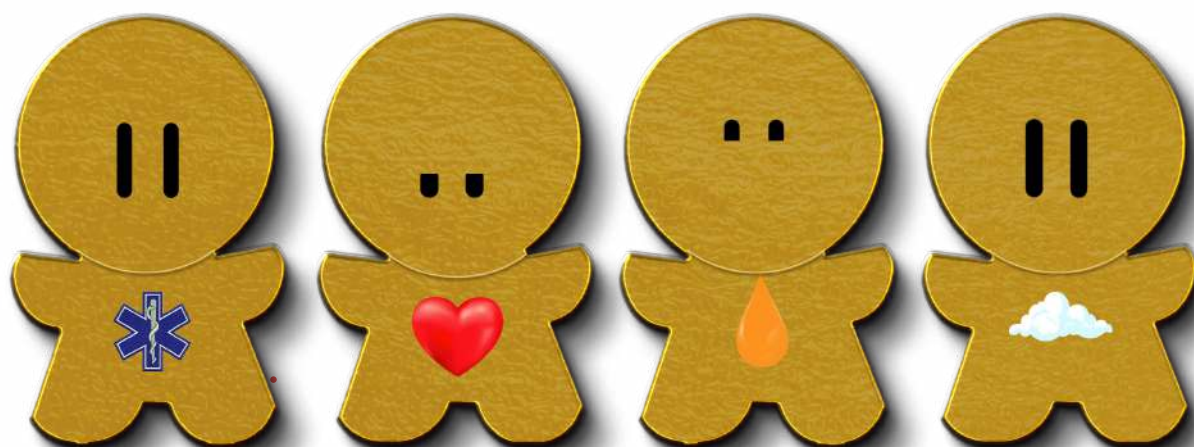

**CATÁLOGO
PRODUTOS
15 ANOS
2022/2023**

WWW.ROMED.COM.BR

Índice

INALOTERAPIA

REANIMADOR MANUAL AMBU (3 Á 8)
ACESSÓRIOS PARA REANIMADOR (9 Á 15)
MÁSCARAS (14 Á 17)
PRESILHA (15)
MACRONEBULIZADOR (18)
UMIDIFICADOR (19)
ASPIRADOR VENTURI/VACUÔMETRO (20 Á 21)



GASOTERAPIA

FLUXÔMETROS (22)
VÁLVULAS PARA REDE (23)
VÁLVULAS PARA CILINDROS (24;25;28;30)
VÁLVULA PARA CENTRAL MANIFOLD (25)
CILINDROS (26 Á 27)
CARRINHOS PARA CILINDRO (26)
TOMADA DUPLA E TRIPLA (29)
TORNEIRA FLECHA (29)
PAINEL PARA UTI/LEITOS (30)
ACESSÓRIOS PARA PAINEL (31)
PAINEL RÉGUA CALHA (31)
POSTO PAREDE (32)
ACESSÓRIOS PARA POSTO PAREDE (32 E 33)



ANESTESIA

TRAQUEIA SILICONE (34 E 35)
ESPAÇO MORTO (36 Á 38)
JARRA PARA UMIDIFICAÇÃO (39)
FIO GUIA MANDRIL (40)
ACESSÓRIOS PARA CIRCUITO BARAKA (14;15;40;49;56;57;58;59;61)
CIRCUITOS PARA VENTILAÇÃO/ANESTESIA (41 Á 45)
ACESSÓRIOS PARA CIRCUITOS (45;59 Á 69)
NEBULIZADOR EM T (46)
CIRCUITO ANESTESIA BARAKA SILICONE (47 Á 50)
CIRCUITO ANESTESIA BARAKA PVC (51 Á 55)
BALÃO RESPIRATÓRIO PVC (56)
BALÃO RESPIRATÓRIO SILICONE (57)
PULMÃO TESTE (57)
VÁLVULA UNIDIRECIONAL (49 E 58)
CONECTORES INTERMEDIÁRIOS (59 Á 69)



FRASCOS

FRASCOS PARA ASPIRAÇÃO (70 E 71)



Bem vindo ao nosso Catálogo de produtos

Sobre Nós

Desde 2007 a ROMED mantém o compromisso de atender seus clientes com a máxima qualidade, entregando o que há de melhor no segmento em que atua.

Profissionais qualificados e dedicados, sempre dispostos a atender integralmente as necessidades dos nossos clientes.

Trabalhamos de forma íntegra e organizada, respeitando totalmente os anseios de nossos clientes, preços justos e qualidade total.

Que venham mais 15 anos!

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965

Rua Major Vieira, 130 Jardim Lambreta - Cotia - S.P. CEP 06710-680

WWW.ROMED.COM.BR
vendas@romed.com.br



Reanimadores em Silicone completo Padrão

RMS:81284390011



Finalidade

Os reanimadores manuais PADRÃO têm como finalidade promover a ventilação artificial, mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões, no caso de pacientes com parada respiratória ou transferência de pacientes intubados. Também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

Características

- » Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização;
- » Máscara em silicone; Válvula unidirecional;
- » Acompanha Reservatório em PVC: 1L Infantil/Neonatal, modelo adulto 2,5L Adulto;
- » Volume do balão: 1600ml adulto / 500ml infantil / 250ml neonato;
- » Extensão em PVC 2 metros; Bolsa para transporte (opcional).

Código	Descrição do produto
R05968	REANIMADOR AMBU SILICONE ADULTO COMPLETO PADRÃO
R05969	REANIMADOR AMBU SILICONE INFANTIL COMPLETO PADRÃO
R05970	REANIMADOR AMBU SILICONE NEONATAL COMPLETO PADRÃO

Reanimadores Manuais em Silicone Padrão II

RMS:81284390011



Descrição

Os reanimadores da marca ROMED são fabricados em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o manipula. É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando espontaneamente.

Finalidade

Os reanimadores manuais PADRÃO II têm como finalidade promover a ventilação artificial, mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões, no caso de pacientes com parada respiratória ou transferência de pacientes intubados. Também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

Características

- » Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização;
- » Máscara em silicone;
- » Válvula unidirecional Bico de Pato;
- » Acompanha Reservatório em PVC: 1L Infantil/Neonatal ou no modelo adulto 2,5L Adulto;
- » Volume do balão: 1600ml adulto / 500ml infantil / 250ml neonato;
- » Extensão em PVC 2 metros; Bolsa para transporte (opcional).

Código	Descrição do produto
R05926	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO PADRAO II COMPLETO
R05925	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL PADRAO II COMPLETO
R05924	REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL PADRÃO II COMPLETO
RMS: 81284390011	

Reanimadores Manuais Plus

Máscara/ Reanimador / Extensão / Reservatório / Bolsa para transporte

RMS:81284390011

Infantil



Código
R04841

Adulto



Código
R04840

Neonatal



Código
R04842

Itens que acompanham



Descrição

- » Balão confeccionado em silicone azul translúcido;
- » Máscara facial em silicone coxim inflável para os modelos adulto e infantil;
- » Válvula unidirecional bico de pato;

Reservatório

- » Infantil/Neonatal: 1000 ML
- » Adulto: 2300 ML

Volume do balão

- » Adulto 1600 ML
- » Infantil 500 ML
- » Neonatal 250 ML.

Reanimadores Manuais Plus II

Máscara/ Reanimador / Extensão / Reservatório / Bolsa para transporte

RMS:81284390011

Infantil



Código
R05978

Adulto



Código
R05977

Neonatal



Código
R05979

Itens que acompanham



Reservatório em silicone

Descrição

- » Balão confeccionado em silicone azul translúcido;
- » Máscara facial em silicone;
- » Válvula Unidirecional;

Reservatório

- » Infantil/Neonatal: 1000 ML
- » Adulto: 2300 ML

Volume do balão

- » Adulto 1600 ML
- » Infantil 500 ML
- » Neonatal 250 ML.

Reanimadores Manuais Silicone Padrão

Infantil



Código
R05952

Adulto



Código
R05951

Neonatal



Código
R05953

Os reanimadores da marca **ROMED** são fabricados em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o manipula. É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando espontaneamente.

Acessórios opcionais



Descrição

- » Balão confeccionado em silicone azul translúcido;
- » Máscara facial em silicone;
- » Válvula Unidirecional;

Reservatório

- » Infantil/Neonatal: 1000 ML
- » Adulto: 2500 ML

Volume do balão

- » Adulto 1600 ML
- » Infantil 500 ML
- » Neonatal 250 ML

Código	Descrição do produto
R05954	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO
R05955	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INF/NEO
R05958	BOLSA P/ TRANSPORTE REANIMADOR

Reanimadores Manuais Silicone Padrão II

RMS:81284390011

Infantil



Código
R05974

Adulto



Código
R05973

Neonatal



Código
R05975

Acessórios opcionais



Descrição

- » Balão confeccionado em silicone azul translúcido;
- » Máscara facial em silicone;
- » Válvula unidirecional bico de pato;

Reservatório

- » Infantil/Neonatal : 1000 ML
- » Adulto: 2500 ML

Volume do balão

- » Adulto 1600 ML
- » Infantil 500 ML
- » Neonatal 250 ML.



Código Descrição do produto

R05980	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO
R05981	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INF/NEO
R05958	BOLSA P/ TRANSPORTE REANIMADOR

Acessórios para Reanimadores



Código	Descrição do produto
R05956	RESERVATÓRIO PVC AD 2500 ML REANIMADOR
R05957	RESERVATÓRIO PVC INF/NEO 1000 ML REANIMADOR
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R04933	RESERVATÓRIO REANIMADOR SILICONE 2,3L ADULTO
R04934	RESERVATÓRIO REANIMADOR 1L SILICONE INF/NEO
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R01051	EXTENSÃO PVC P/UMIDICADOR/REANIMADOR/CATETER
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R01094	EXTENSÃO REANIMADOR PVC 2 MTS
RMS: 81284390011	

Acessórios para Reanimadores



Código	Descrição do produto
R05959	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO ADULTO
R05960	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PADRÃO INF/NEO
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R05965	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PLUS ADULTO
R05966	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR PLUS INF/NEO
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R01035	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR ADULTO
R01093	VÁLVULA SUPERIOR REANIMADOR INF/NEO
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R05961	VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR PADRÃO
RMS: 81284390011	

Acessórios para Reanimadores




Código	Descrição do produto
R05967	VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR PLUS
RMS: 81284390011	




Código	Descrição do produto
R04569	KIT C/ 10 DIAFRAGMAS P/ VÁLVULA SUPERIOR BARAKA/REANIMADOR
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R01257	KIT C/ 3 DIAFRAGMAS P/ VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR
RMS: 81284390011	

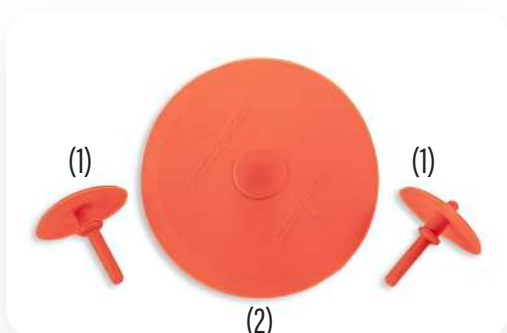

Código	Descrição do produto
R05992	KIT C/ 10 PÇS DIAFRAGMAS 18MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR (1)
R05993	KIT C/ 10 PÇS DIAFRAGMAS 46MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR (2)
RMS: 81284390011	

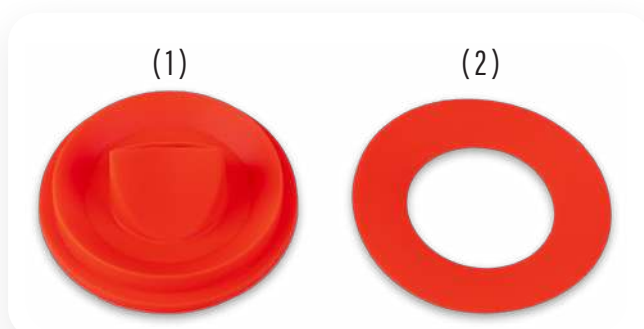

Código	Descrição do produto
R01154	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS SILICONE BICO DE PATO P/AMBU (1)
R04607	KIT C/05 PCS DIAFRAGMAS P/VALV.SUP. EXT.REAN.SIL. (2)
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R05954	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO
R05955	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INF/NEO
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R05971	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO C/ VÁLVULA
R05972	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INF/NEO C/ VÁLVULA
RMS: 81284390011	



Código	Descrição do produto
R05980	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO
R05981	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INF/NEO
RMS: 81284390011	

Válvula Peep



Descrição

A Válvula PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final) em policarbonato (PC) e mola com carga ajustável de 5 a 20 cm H₂O.

Indicada para utilização em sistema CPAP/EPAP ou Ressuscitador Manual, com a finalidade de manter uma pressão positiva pré-determinada ao final da expiração.

Código	Descrição do produto
R01061	VÁLVULA PEEP 5-20 CM H ₂ O C/ SUPORTE
R01050	VÁLVULA PEEP 5-20 CM H ₂ O
R01052	SUPORTE P/ VÁLVULA PEEP (DIVERTER)
RMS: 81284390011	

Kit Válvula de Segurança para Válvula Unidirecional

Código	Descrição do produto
R05990	KIT VÁLVULA SEGURANÇA UNIDIR ADULTO ROMED
R05991	KIT VÁLVULA SEGURANÇA UNIDIR INF/NEO ROMED
RMS: 81284390011	



Kit Molas Válvulas Unidirecional



Código	Descrição do produto
R05999	KIT C/ 5 MOLAS P/ VÁLVULA UNIDIRECIONAL ROMED
RMS: 81284390011	

Máscaras em Silicone



Descrição do Produto

As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adultos (números 3, 4 e 5) fabricadas pela Romed, são totalmente em silicone macio, sendo mais confortáveis à face dos pacientes.

As máscaras faciais em silicone indicadas para pacientes prematuros, neonatal e infantil (números 0, 1 e 2) são confeccionadas totalmente em silicone macio, com perfeita adequação à face do paciente.

Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores e Baraka Romed.

Código	Descrição do produto
R05982	MÁSCARA SILICONE N. 2 REAN/ANEST/VNI INF C/ GARRA (1)
R01103	MÁSCARA SILICONE N. 3 REAN/ANEST/VNI INF/ADOLESC (2)
R01102	MÁSCARA SILICONE N. 4 REAN/ANEST/VNI ADULTO (3)
R01101	MÁSCARA SILICONE N. 5 REAN/ANEST/VNI ADULTO GDE (4)
R01053	MÁSCARA SILICONE N. 0 REAN/ANEST/VNI PREMATURO (5)
R01054	MÁSCARA SILICONE N. 1 REAN/ANEST/VNI NEONATAL (6)
R05976	MÁSCARA SILICONE N. 5 REAN/ANEST/VNI ADULTO (7)
RMS: 81284390011	

Máscaras em Silicone



Código	Descrição do produto
R01056	MÁSCARA SILICONE N. 3 REAN/ANEST INFANTIL
R01057	MÁSCARA SILICONE N. 4 REAN/ANEST ADULTO
R01058	MÁSCARA SILICONE N. 5 REAN/ANEST ADULTO GDE
RMS: 81284390011	

Descrição do Produto

As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adultos (números 3, 4 e 5) fabricadas pela Romed, são compostas por cúpula confeccionada em policarbonato (PC) e coxim em silicone. Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores e Baraka Romed.

Máscaras em Silicone

Código	Descrição do produto
R05982	MÁSCARA SILICONE N. 2 REAN/ANEST/VNI INF C/ GARRA
RMS: 81284390011	



Máscara Com Coxim Inflável Silicone



Finalidade

A máscara com coxim inflável em silicone é indicada para auxiliar nos procedimentos de anestesia, reanimação e ventilação não invasiva (VNI).

Características:

Bojo confeccionado em PSU; Coxim inflável em silicone. Pressão para inflar o coxim (máxima) 65mmHg $\pm$ 5mmHg.

Código	Descrição do produto
R01190	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SIL. INF.2 REAN/ANEST/VNI
R01128	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILICONE INF.3 REAN/ANEST
R01126	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILICONE AD.4 REAN/ANEST
R01127	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SILICONE AD.5 REAN/ANEST
R01191	MÁSCARA COXIM INFLÁVEL SIL.OBE.6 REAN/ANEST/VNI

RMS:81284390015

Descrição do Produto

As máscaras com coxim inflável em silicone são totalmente autoclaváveis a 134°C. Compostas por cúpula confeccionada em policarbonato (PC) e coxim inflável em silicone. Pode ser utilizada em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed. A Máscara com Coxim Inflável em Silicone é completa e totalmente intercambiável em quaisquer produtos de fabricação Romed e com quaisquer outros produtos, de outros fabricantes, que possuam conector cônico normatizado conforme ABNT NBR ISO 5356-1.

Máscara Com Coxim Inflável PVC

Descrição do Produto

Confeccionadas em PVC flexível, as máscaras com coxim inflável são macias, leves e muito confortáveis. O coxim inflável com pressão regulável é a prova de vazamentos e a válvula permite o ajuste exato de volume de ar.

O bojo e o coxim transparentes facilitam a observação do paciente.

Finalidade

Destinada a ventilação das vias aéreas, para uso não invasivo oro nasal. Utilizada em oxigenoterapia, anestesia e outros procedimentos.

Características:

- » Bojo e coxim inflável em PVC transparentes e a prova de vazamentos;
- » Anel de gancho com código de cores para facilitar a identificação do tamanho;
- » Leve e macia, proporciona maior conforto ao paciente;
- » Válvula do coxim permite o ajuste do volume de ar.



Código	Descrição do produto	Código	Descrição do produto
R01037	MÁSCARA COXIM INFL. PVC 0 PREMATURO REAN/ANEST	R01040	MÁSCARA COXIM INFL. PVC 3 ADOLESC. REAN/ANEST
R01038	MÁSCARA COXIM INFL. PVC 1 NEO. REAN/ANEST	R01041	MÁSCARA COXIM INFL. PVC 4 AD. REAN/ANEST
R01039	MÁSCARA COXIM INFL. PVC 2 INF. REAN/ANEST	R01042	MÁSCARA COXIM INFL. PVC 5 OBESO REAN/ANEST

RMS:81284390004

Presilha Silicone


Descrição

Presilhas confeccionadas em silicone flexível.

Possui ajuste com perfurações nas extremidades regulagem do fixador junto à cabeça e a máscara, também conhecidas como fixador cefálico.

Código	Descrição do produto
R06503	PRESILHA SILICONE ADULTO M / INFANTIL ROMED
R06502	PRESILHA SILICONE ADULTO G ROMED

RMS: 81284390018

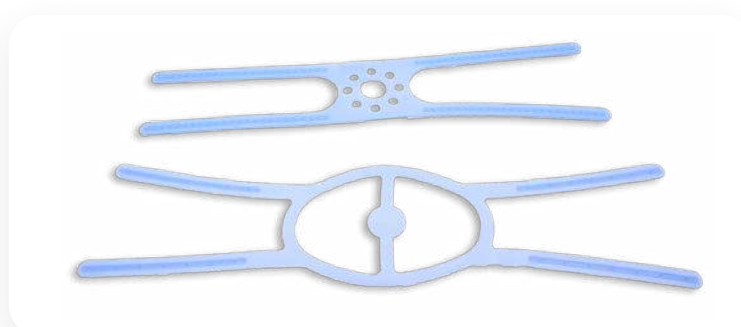

Máscara Venturi



Descrição do Produto

A máscara Venturi, também conhecida como máscara de arrastamento de ar, constitui um método seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio. Composta por máscara, traqueia corrugada em PVC de 155mm, seis diluidores, suporte do diluidor e extensão plástica com 2 metros.

Finalidade

A oxigenoterapia é um tratamento cujo objetivo é manter a saturação de O₂ acima de 90%, o nível recomendado para a saúde. A máscara de Venturi, possibilita um controle da fração inspirada de O₂ (FiO₂) fornecida ao paciente, evitando dosagens nocivas. Neste item, a codificação da FiO₂ fornecida ao sistema é realizada por meio de válvulas plásticas de diferentes cores, de acordo com a quantidade de oxigênio que elas liberam em litros por minuto.

Características

- » Máscara confeccionada em PVC;
- » Traqueia corrugada 15mm em PVC;
- » 06 Diluidores;
- » Suporte dos diluidores;
- » Extensão para conexão no umidificador PVC.

Código

Descrição do produto

R01079	MÁSCARA VENTURI ADULTO
R01080	MÁSCARA VENTURI INFANTIL

RMS: 81284390009

Máscara Para Traqueostomia

Descrição do Produto

A máscara para traqueostomia é indicada para administração de oxigênio e ou aerossóis em pacientes com acesso de traqueostomia e laringectomia. Confeccionada em PVC atóxico, macio e transparente, facilitando assim a visualização durante o uso. Possui faixa elástica ajustável e conector com ângulo de rotação de 360°.

Finalidade

A Máscara para Traqueostomia tem a função de auxiliar a ventilação assistida ao paciente com ar ambiente umidificado ou enriquecido com oxigênio.

É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica.

Características

- » Máscara com faixa elástica ajustável, confeccionada em PVC macio;
- » Cúpula transparente para visualização;
- » Conector com ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão;
- » Modelos: Adulto e infantil;



Código

Descrição do produto

R01081	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO
R01082	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL

RMS: 81284390009



Código

Descrição do produto

R01236	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA AD. C/CONEC.P/EXT.
R01237	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INF. C/CONEC.P/EXT.

RMS: 81284390009

Máscara Facial



Descrição do Produto

As máscaras para nebulização Romed são confeccionadas em PVC. Possuem superfície lisa que garante ajuste perfeito sem colar na pele e aberturas laterais para evitar a concentração de gás carbônico em seu interior, proporcionando uma inalação agradável ao paciente.

Código	Descrição do produto
R01088	MÁSCARA FACIAL ADULTO
R01089	MÁSCARA FACIAL INFANTIL
RMS: 81284390009	

Máscara Alta Concentração

Descrição do Produto

A Máscara de alta concentração tem a função de auxiliar a ventilação assistida ao paciente com ar ambiente ou enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento da apneia obstrutiva de adultos e crianças, falha respiratória e insuficiência respiratória.

Características

- » Máscara confeccionada em PVC macio com faixa elástica ajustável;
- » Presilha metálica para ajuste nasal;
- » Reservatório em polipropileno (PP);
- » Extensão em PVC, comprimento 2000mm (padrão);
- » Capacidade do reservatório: Adulto 1000ml / Infantil 600ml;



Código	Descrição do produto
R01083	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO
R01084	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL
RMS: 81284390009	

Máscara Média Concentração



Código	Descrição do produto
R01085	MÁSCARA MÉDIA CONCENTRAÇÃO ADULTO
R01086	MÁSCARA MÉDIA CONCENTRAÇÃO INFANTIL
RMS: 81284390009	

Descrição

A Máscara média concentração é indicada para administrar oxigênio para pacientes. É indicado para canalizar os gases para fins de administração no corpo, é usado para conectar a um dispositivo médico ativo.

Macronebulizador Ar Comprimido



Macronebulizador Oxigênio



Código

Descrição do produto

R05027	MACRONEBULIZADOR TRAQ.SIL.1200MM AD.O2
R05028	MACRONEBULIZADOR TRAQ.SIL.1200MM INF.O2
R05102	MACRONEBULIZADOR TRAQ.SIL.1500MM AD.O2
R05103	MACRONEBULIZADOR TRAQ.SIL.1500MM INF.O2
R05031	MACRONEBULIZADOR TRAQ.SIL.1200MM AD. AR
R05032	MACRONEBULIZADOR TRAQ.SIL.1200MM INF. AR
R05017	MACRONEBULIZADOR 500 ML O2
R05018	MACRONEBULIZADOR 500 ML AR

RMS: 81284390006

Descrição do Produto

Os conjuntos para nebulização contínua fabricados pela Romed são indicados para utilização em serviços de baixa pressão, utilizando oxigênio ou ar comprimido.

Finalidade

Desenvolvidos para possibilitar a oxigenação direta ao paciente através das atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados com o objetivo de enriquecer o gás inalado pelo paciente.

Características:

- » Macronebulizador: Copo graduado, confeccionado em policarbonato;
- » Capacidade: Macronebulizador 500ml;
- » Tampa e borboleta: Em nylon;
- » Traqueias em silicone com 1,20m ou 1,50m de comprimento;
- » Máscara facial modelo infantil - PVC com conector em pc;
- » Fluxo de trabalho: 3,5lpm a 12lpm;
- » Pressão de trabalho: (Ar e O2): 3,5 a 8kgf/cm²;
- » Borboleta de conexão Ar: 3/4" (Norma ABNT);
- » Modelos: Infantil e adulto;
- » (Norma ABNT);

Umidificador e Kit de Reposição

Descrição

O Umidificador foi desenvolvido para a atividade de Umidificação, gerada pela passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal que arrasta a água / solução fisiológica do recipiente, carregando as partículas para as vias aéreas. Disponível para Oxigênio ou Ar comprimido medicinal.

Finalidade

Os umidificadores possibilitam a oxigenação direta ao paciente, atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados com tempo prolongado, com o objetivo de enriquecer o gás inalado pelo paciente e manter as vias aéreas umidificada e enriquecer o gás inalado pelo paciente.

Características:

- » Frasco em polietileno de alta densidade (PEAD);
- » Capacidade: 250ml;
- » Kit borbulhador: Polipropileno (PP) / Tubo em Polietileno (PE);
- » Pressão de trabalho: 3,5 a 6,0 kgf / cm²;
- » Conexão de entrada com rosca metálica ou plástica conforme especificações das normas ABNT;



Código	Descrição do produto
R05104	UMIDIFICADOR 250 ML O2 C/ ROSCA METAL (1)
R05120	UMIDIFICADOR 250 ML AR C/ ROSCA METAL (2)
001494	FRASCO 250 ML UMIDIFICADOR ROMED (3)
001571	KIT TAMPA UMIDIFICADOR AR COMPRIMIDO ROSCA METAL (4)
001570	KIT TAMPA UMIDIFICADOR O2 ROSCA PLÁSTICO (5)
001568	KIT TAMPA UMIDIFICADOR O2 ROSCA METAL (6)
RMS: 81284390008	



Código	Descrição do produto
R05019	UMIDIFICADOR FRASCO 250 ML OXIGÊNIO
R05020	UMIDIFICADOR FRASCO 250 ML AR COMPRIMIDO
RMS:81284390008	



Código	Descrição do produto
001868	UMIDIFICADOR 250 ML O2 C/EXTENSAO P/ CATETER
RMS:81284390008	



Código	Descrição do produto
R05021	UMIDIFICADOR FRASCO 250 ML O2 C/EXT.E MÁSC.AD.
R05021-1	UMIDIFICADOR FRASCO 250 ML O2 C/EXT.E MÁSC.INF.
RMS:81284390008	

Aspiradores de Rede Plástico



Descrição do Produto

Os aspiradores de rede fabricados pela Romed são apresentados em dois modelos: Aspiradores Venturi para uso em redes de gases para oxigênio e ar comprimido medicinal e Vacuômetro para uso em rede de vácuo. Ambos disponíveis nas versões com frasco em plástico ou com frasco de vidro.

Finalidade

O Aspirador de rede foi desenvolvido para auxiliar na aspiração de secreções de pacientes em diferentes procedimentos médico-hospitalares.

Catacterísticas

- » Frasco coletor em plástico pvc resistente à quedas;
- » Capacidade: 500ml (graduado);
- » Tampa em polipropileno e nylon;
- » Pressão de entrada: (Ar e O₂): 6Kgf cm²;
- » Escala do vacuômetro: 0 e 76 cm Hg (externa) e 0 a 30 pol.Hg (Interna);

Código	Descrição do produto
R05106	ASPIRADOR REDE O2 PLÁSTICO PVC 500 ML
R05108	ASPIRADOR REDE VAC PLÁSTICO PVC 500 ML
R05107	ASPIRADOR REDE AR PLÁSTICO PVC 500 ML
RMS: 81284390019	

Aspiradores de Rede Vidro

Descrição do Produto

Os aspiradores de rede fabricados pela Romed são apresentados em dois modelos: Aspiradores Venturi para uso em redes de gases para oxigênio e ar comprimido medicinal e Vacuômetro para uso em rede de vácuo. Ambos disponíveis nas versões com frasco em plástico ou com frasco de vidro.

Finalidade

O Aspirador de rede foi desenvolvido para auxiliar na aspiração de secreções de pacientes em diferentes procedimentos médico-hospitalares.

Características

- » Frasco coletor em vidro; Capacidade: 500ml (graduado);
- » Tampa em polipropileno e nylon;
- » Pressão de entrada: (Ar e O₂): 6Kgf cm²;
- » Escala do vacuômetro: 0 e 76 cm Hg (externa) e 0 a 30 pol.Hg (Interna);
- » Conexões conforme especificações das normas ABNT;
- » Boia antitransbordamento em polipropileno (PP).



Código	Descrição do produto
R05009	ASPIRADOR REDE O2 VIDRO 500 ML
R05010	ASPIRADOR REDE AR VIDRO 500 ML
RMS: 81284390013	



Aspiradores de Rede Sem Frasco

Código	Descrição do produto
003231	ASPIRADOR REDE OXIGÊNIO SEM FRASCO
003240	ASPIRADOR REDE AR SEM FRASCO
RMS: 81284390013	
003234	ASPIRADOR REDE VÁCUO S/ FRASCO
RMS: 81284390017	

Vacuômetro com Frasco Vidro

Código	Descrição do produto
R05011	ASPIRADOR REDE VAC VIDRO 500 ML
RMS: 81284390017	



Manômetro Vacuômetro

Código	Descrição do produto
006316	MANÔMETRO P/ VACUÔMETRO O A 76 CM/HG ROMED

Fluxômetro



Descrição do Produto

Os fluxômetros fabricados pela Romed oferecem alta precisão e qualidade. Possuem corpo e niple confeccionados em latão cromado de alta resistência, bilha em policarbonato e esfera em aço inoxidável. Foram desenvolvidos para controlar a quantidade exata de gás (Oxigênio ou Ar comprimido medicinal) através de uma escala onde é possível regular a vazão do gás utilizado em litros por minuto.

Finalidade

Indicado onde há necessidade de controle e regulação do fluxo de gás fornecido para os equipamentos médicos.

Pressão de trabalho:

Regulador dentro da faixa de +/-0,5kgf/cm²;

Escala definida com pressão de trabalho de 3,5kgf/cm².

Características

- » Corpo e niple de saída em latão cromado;
- » Esfera em aço inoxidável;
- » Bilhas em policarbonato;
- » Escala de vazão: 0 a 15 l/min/min;
- » Borboleta em polipropileno com rosca interna em metal.

Produtos relacionados

- » Umidificadores
- » Posto parede
- » Válvula de cilindro
- » Painei

Código	Descrição do produto
R05015	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA OXIGÊNIO
R05016	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA AR COMPRIMIDO
RMS: 81284390001	

Bicos P/ Saída Fluxômetro



Código	Descrição do produto
R05086	KIT C/ 10 BICOS P/ SAÍDA FLUXÔMETRO OXIGÊNIO
R05087	KIT C/ 10 BICOS P/ SAÍDA FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO
RMS: 81284390001	

Bico de Saída Escalonado



Código	Descrição do produto
R0138	BICO SAÍDA PLÁSTICO O2 ESCALONADO
RMS: 81284390001	

Válvulas Reguladoras de Pressão para Rede de Gases



Código	Descrição do produto
R05006	VÁLVULA REG. REDE OXIGÊNIO
R05007	VÁLVULA REG. REDE AR COMPRIMIDO
R05008	VÁLVULA REG. REDE ÓXIDO NITROSO
RMS: 81284390014	

Descrição

As válvulas reguladoras de pressão para rede de gases possuem corpo construído em latão cromado de alta resistência, manômetro para indicação da pressão ajustada e botão de regulagem da pressão.

O ajuste da pressão é variável e feito através do botão de regulagem de fluxo que pode variar de 0 a 11 kgf/cm.

Finalidade

Foram desenvolvidas para serem conectadas à rede de gás medicinal de baixa pressão, onde a pressão de saída é regulada por meio de botão de regulagem e verificada pelo manômetro. Normalmente utilizadas para a alimentação de gases medicinais nos aparelhos de anestesia, respiradores e equipamentos que necessitam de uma pressão controlada. As válvulas reguladoras de pressão estão disponíveis em três opções de gases medicinais: Ar comprimido medicinal, oxigênio e óxido nitroso.

Características

- » Tipos de gás: Oxigênio, Ar comprimido e Óxido Nitroso;
- » Corpo: Latão cromado;
- » Botão Regulado de pressão;
- » Borboleta: Polipropileno (PP);
- » Escala do manômetro: 0 a 11 kgf/cm²;
- » Pressão de entrada: 7 kgf/cm²;
- » Pressão de saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável);
- » Escala de pressão do manômetro: 0 à 11 kgf/cm².

Manômetro para Válvula de Rede

- » Regulador de pressão de simples estágio.
- » Corpo forjado em latão.
- » Válvula de segurança externa.
- » Pressão Máxima de Entrada: 220 kgf/cm²
- » Pressão Máxima de Saída: 10 kgf/cm²
- » Vazão Máxima: 30m³/h

Código	Descrição do produto
006315	MANÔMETRO P/ VÁLVULA REDE 0 A 10 KG ROMED



Válvulas Redutoras de Pressão Para Cilindros



Código	Descrição do produto
R05061	VÁLVULA REG. CILINDRO OXIGÊNIO C/ 2 MAN.
RMS: 81284390014	



Código	Descrição do produto
R05062	VÁLVULA REG. CILINDRO AR R.A. NB 218 C/ 2 MAN.
RMS: 81284390014	



Código	Descrição do produto
R05063	VÁLVULA REG. CILINDRO AR R.N. NB 204 C/ 2 MAN.
RMS: 81284390014	



Código	Descrição do produto
R05064	VÁLVULA REG. CILINDRO NITROGÊNIO C/2 MAN.
RMS: 81284390014	

- » Regulador de pressão de simples estágio.
- » Corpo forjado em latão.
- » Válvula de segurança externa.
- » Pressão Máxima de Entrada: 220 kgf/cm²
- » Pressão Máxima de Saída: 10 kgf/cm²
- » Vazão Máxima: 30m³/h



Código	Descrição do produto
R05065	VÁLVULA REG. CILINDRO CO2 GÁS CARBÔNICO C/2 MAN.
RMS: 81284390014	



Código	Descrição do produto
R05066	VÁLVULA REG. CILINDRO N2O ÓXIDO NITROSO C/2 MAN.
RMS: 81284390014	

Válvulas com 2 Manômetros para Central Manifold



Código	Descrição do produto
R05067	VÁLVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD OXIGÊNIO C/2 MAN.
R05068	VÁLVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD AR R.A. NB 218 C/2 MAN.
R05069	VÁLVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD AR R.N. NB 204 C/2 MAN.
R05070	VÁLVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD NITROGÊNIO C/2 MAN.
R05071	VÁLVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD GÁS CARBÔNICO C/2 MAN.
R05072	VÁLVULA REG. P/CENTRAL MANIFOLD ÓXIDO NITROSO C/2 MAN.
RMS: 81284390014	



Cilindros de Aço

Código	Descrição do produto
000125	CILINDRO AÇO 02 3L (0,45 M3)
000126	CILINDRO AÇO 02 05 L (0,75 M3)
000127	CILINDRO AÇO 02 7L (1 M3)
000128	CILINDRO AÇO 02 10L (1,5 M3)
000129	CILINDRO AÇO 02 15L (2,25 M3)
000130	CILINDRO AÇO 02 20L (4 M3)
000131	CILINDRO AÇO 02 40L (8 M3)
000132	CILINDRO AÇO 02 50L (10 M3)

Código

Descrição do produto

RQ5076	CARRINHO P/ CILINDRO 3 LTS AÇO OU ALUMÍNIO
RQ5077	CARRINHO P/ CILINDRO ALUMÍNIO 5 LITROS
RQ5078	CARRINHO P/ CILINDRO 5 LITROS AÇO
RQ5079	CARRINHO P/ CILINDRO 7 LITROS AÇO
RQ5080	CARRINHO P/ CILINDRO 10 LITROS AÇO
RQ5081	CARRINHO P/ CILINDRO 15 LTS AÇO
RQ5082	CARRINHO P/ CILINDRO 20 LITROS AÇO
RQ5083	CARRINHO P/ CILINDRO 40 OU 50 LITROS AÇO

Carrinhos para Cilindros



Confeccionado em aço com pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Rodízios de borracha.



Cilindros de Alumínio

Código	Descrição do produto
000134	CILINDRO ALUMÍNIO 02 03L
000135	CILINDRO ALUMÍNIO 02 05L
000137	CILINDRO ALUMÍNIO 5L 02 C/VÁLVULA INTEGRADA



Válvulas para Cilindro 1 Saída

Descrição

As Válvulas redutoras de pressão para cilindro, foram desenvolvidas para controlar a pressão de saída de gás medicinal. Estão disponíveis em cinco opções de gases medicinais: Ar comprimido medicinal, Oxigênio, Óxido nitroso, Dióxido de carbono e Nitrogênio.

Finalidade

Controlar a pressão de saída de gases dos cilindros.

Características

- » Corpo em latão cromado; Pressão de entrada: Máximo 200 kgf/cm²;
- » Pressão de saída: $3,5 \pm 0,3$ kgf/cm²;
- » Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²);
- » Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200 Kgf/cm²;
- » Válvula de alívio (segurança): $7,0 \pm 0,3$ Kgf/cm²;
- » Válvula de pressão variável: Faixa de trabalho 0 - 8 kgf/cm²;
- » Conexões de entrada e saída conforme norma ABNT NBR 11.725.



Código	Descrição do produto
R05002	VÁLVULA RED. CILINDRO 1 SAÍDA OXIGÊNIO
R05003	VÁLVULA RED CILINDRO 1 SAÍDA AR R.A. NB218
R05003-1	VÁLVULA RED. CILINDRO 1 SAÍDA AR R.N. NB204
RMS: 81284390014	

Válvulas para Cilindro com Fluxômetro



Código	Descrição do produto
R05000	VÁLVULA RED CILINDRO C/ FLUXÔMETRO O ²
R05001	VÁLVULA RED CILINDRO C/FLUXÔMETRO AR R.A. NB218
R05001-1	VÁLVULA RED. CILINDRO C/FLUXÔMETRO AR R.N.NB204
RMS: 81284390014	

Válvulas para Cilindro com 2 Saídas

Código	Descrição do produto
R05004	VÁLVULA RED CILINDRO 2 SAÍDAS OXIGÊNIO
R05005	VALVULA RED CILINDRO 2 SAIDAS AR R.A.NB218
R05005-1	VALVULA RED CILINDRO 2 SAIDAS AR R.N.NB204
RMS: 81284390014	



Manômetro para Válvula Cilindro

Código	Descrição do produto
006314	MANÔMETRO P/ VÁLVULA CILINDRO 0-315 KGF/CM

Tomada Tripla

Descrição

As Tomadas duplas e triplas para gases foram desenvolvidas para multiplicar as saídas de gases e vácuo, dando maior autonomia em locais onde os pontos são escassos, sendo que, sua pressão de entrada/saída será igual a pressão do dispositivo de alimentação do gás.

Possuem válvula de impacto para bloqueio e segurança quando o bico auxiliar não está em uso. Indicadas para uso nos pontos de gases medicinais ou vácuo, reguladores de pressão (Válvulas de cilindros, Válvulas de Rede).

Finalidade

São indicadas para auxiliar na distribuição de gases (ar comprimido medicinal, oxigênio, óxido nítrico, gás carbônico, nitrogênio e vácuo), bem como na alimentação de equipamentos e acessórios para procedimento médico-hospitalar.



Características:

- » Material: PVC com malhas de fio de alta tenacidade;
- » Diâmetros: 11,6mm (externo) x 6,3mm (interno);
- » Pressão de trabalho: suporta até 14 kgf/cm²;
- » Conector borboleta em polipropileno (PP).

Código	Descrição do produto
R04142	TOMADA TRIPLA C/VÁLVULA DE IMPACTO P/ OXIGÊNIO
R04143	TOMADA TRIPLA C/VÁLVULA DE IMPACTO P/ AR COMPRIMIDO
R04144	TOMADA TRIPLA C/VÁLVULA DE IMPACTO P/ VÁCUO
R04145	TOMADA TRIPLA C/VÁLVULA DE IMPACTO P/ ÓXIDO NITROSO
RMS: 81284399001	

Tomada Dupla

Código	Descrição do produto
R04138	TOMADA DUPLA C/VÁLVULA DE IMPACTO P/OXIGÊNIO
R04139	TOMADA DUPLA C/VÁLVULA DE IMPACTO P/AR COMPRIMIDO
R04140	TOMADA DUPLA C/VÁLVULA IMPACTO VÁCUO
R04141	TOMADA DUPLA C/VÁLVULA IMPACTO ÓXIDO NITROSO
RMS: 81284399001	



Torneira Flecha

Descrição

A Válvula BI também conhecida como Torneira Flecha possui corpo em latão cromado de alta resistência e botão de regulação em polipropileno.

É indicada para o controle de fluxo de gases medicinais em pontos de baixa pressão.

Disponível para três tipos de gases medicinais: Oxigênio, Ar comprimido, Óxido nítrico e vácuo. Todos os modelos de Válvula BI possuem válvula de impacto.

Finalidade

Válvula BI – Torneira Flecha foi desenvolvida para auxiliar na alimentação de gases medicinais a partir do painel da rede de gases, posto de consumo e outras fontes, regulando o fluxo.



Código	Descrição do produto
R05088	TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA BI DE IMPACTO DE AR COMPRIMIDO
R05089	TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA BI DE IMPACTO DE OXIGÊNIO
R05090	TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA BI DE IMPACTO DE VÁCUO
R05091	TORNEIRA FLECHA C/VÁLVULA BI DE IMPACTO DE ÓXIDO NITROSO
RMS: 81284390012	

Características

- » Corpo em latão cromado;
- » Tipos de gases: Oxigênio, Ar comprimido medicinal, óxido nítrico, Gás carbônico, nitrogênio e vácuo;
- » Botão de regulação em polipropileno (PP);
- » Pressão de trabalho: 3,5 ± 0,3 kgf/cm²;
- » Rosca de entrada: 1/ 4 NPT;
- » Rosca de saída: oxigênio/Argônio: 9/16 UNF outros gases ¾ UNF.

Válvula Red. C/ Fluxômetro Digital

Descrição

A Válvula com Fluxômetro Digital para Oxigênio é um dispositivo redutor de pressão que diminui a pressão do gás de um cilindro a níveis que possam ser utilizados com segurança pelo usuário. Controle de fluxo necessário para procedimento clínico ou resgate.

Finalidade

Tem a função de reduzir a alta pressão de saída em cilindros de oxigênio para a pressão de trabalho de 3,5 Kg/cm². Fluxômetro incorporado para indicar e controlar o fluxo do oxigênio a ser fornecido.

Características

- » Corpo em alumínio anodizado;
- » Tipos de gás: Oxigênio;
- » Fluxo de gás: 0 à 15 lpm;
- » Pressão de entrada: Máximo 200 kgf/cm²;
- » Precisão de saída: 3,5 ± 0,3 kgf/cm²;
- » Escala do manômetro: 0 à 3000 psi;
- » Escala de vazão: 0 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 e 15 lpm.



Código

R05073

RMS: 81284390014

Descrição do produto

VÁLVULA RED. C/ FLUXÔMETRO DIGITAL O₂

Painel para UTI / Leitos



Descrição

O Painel UTI/Leitos destina-se a distribuir a rede elétrica e/ou de gases medicinais em pontos de apoio aos materiais, equipamentos e auxiliares em diversos ambientes, oferece praticidade e facilidade de manutenção.

Possui isolamento interno entre os módulos elétricos.

Características

- » Personalização de ponto de acordo com a necessidade de cada cliente.
- » Perfil frontal: Alumínio extrudado.
- » Isolamento interno entre módulos elétrico e de gases
- » Tubo para gases: material poliuretano (PU).
- » Conexões de entrada saída: latão cromado conforme norma ABNT NBR 11906.
- » Tensão de alimentação: 127V / 220V.

Código

R05060

RMS: 81284390012

Descrição do produto

PAINEL P/ UTI / LEITOS ALUMÍNIO

Acessórios para Painel UTI / Leitos



Código	Descrição do produto
003265	VÁLVULA MED.P./PAINEL MONOBLOCO C/BICO OXIGÊNIO
003266	VÁLVULA MED.P./PAINEL MONOBLOCO C/BICO AR COMPRIMIDO
003267	VÁLVULA MED.P./PAINEL MONOBLOCO C/BICO VÁCUO
003268	VÁLVULA MED.P./PAINEL MONOBLOCO C/BICO OXIDO NITROSO
003269	VÁLVULA MED.P./PAINEL MONOBLOCO C/BICO NITROGÊNIO
003270	VÁLVULA MED.P./PAINEL MONOBLOCO C/BICO GÁS CARBÔNICO
RMS: 81284390012	

Painel Régua Calha



Descrição

O painel régua tipo calha possui perfil confeccionado em alumínio anodizado e é indicado para distribuir a rede de gases em pontos de apoio.

Características do Circuito:

- » Conexões de entrada e saída: Conforme a norma ABNT NBR 11906;
- » Anel trava: Poliamida (PA);
- » Tubo para gases em poliuretano (PU);
- » Tarugo em latão;
- » Conexão de gases: Latão cromado.

Características do Painel Frontal:

- » Canopla (Interna / Externa): ABS alto impacto;
- » Tarugo (interno / externo): Latão;
- » Pino de impacto: Latão/borracha nitrílica/aço;
- » Conexões de entrada e saída conforme norma ABNT NBR 11.906.

Código	Descrição do produto
R05084	PAINEL RÉGUA CALHA C/ 3 PONTOS O2
RMS: 81284390012	

Posto Parede



Descrição

O Posto Parede para rede de gases ROMED está disponível em duas configurações (interno e externo) sendo que, o posto parede interno é indicado quando as tubulações de gases medicinais estão embutidas na parede do hospital. Já o posto parede externo é indicado quando a tubulação de gases medicinais é visível e percorre a parede pelo lado externo. Ambas as configurações possuem canopla em ABS de alto impacto com indicação do tipo de gás, válvula de impacto para estanqueidade do gás, tarugo (interno/externo) em latão e conexões de entrada e saída conforme norma ABNT NBR 11906. Os postos parede para rede de gases estão disponíveis em seis opções: Ar Comprimido, Oxigênio, Nitrogênio, Óxido Nitroso, Gás Carbônico e Vácuo.

Características:

- » Canopla (Interna / Externa): ABS alto impacto;
- » Tarugo (interno / externo): Latão;
- » Pino de impacto: Latão/borracha nitrílica/aço;
- » Conexões de entrada e saída conforme norma ABNT NBR 11.906.

Finalidade

O posto de parede é fundamental nas unidades de atendimento para que os equipamentos de gasoterapia sejam conectados, assim como os equipamentos de suporte à vida "respiradores pulmonares".

A utilização do posto parede elimina a necessidade de uso de cilindros e mantém a sala limpa e organizada dando maior autonomia e segurança à equipe médica.

Código	Descrição do produto	Código	Descrição do produto
000397	POSTO PAREDE EXTERNO P/OXIGÊNIO	000401	POSTO PAREDE INTERNO P/OXIGÊNIO
000398	POSTO PAREDE EXTERNO P/AR COMPRIMIDO	000402	POSTO PAREDE INTERNO P/AR COMPRIMIDO
000399	POSTO PAREDE EXTERNO P/VÁCUO	000403	POSTO PAREDE INTERNO P/ VÁCUO
000400	POSTO PAREDE EXTERNO P/ÓXIDO NITROSO	000404	POSTO PAREDE INTERNO P/ÓXIDO NITROSO
001876	POSTO PAREDE EXTERNO P/NITROGÊNIO	001875	POSTO PAREDE INTERNO P/NITROGÊNIO
005072	POSTO PAREDE EXTERNO P/GÁS CARBÔNICO CO2	005073	POSTO PAREDE INTERNO P/GÁS CARBÔNICO CO2

RMS: 81284390012

Kits Reposição Para Posto Parade

Código	Descrição do produto
000540	VÁLVULA MEDICINAL NIPLE P/ POSTO DE OXIGÊNIO
000538	VÁLVULA MEDICINAL NIPLE P/ POSTO AR COMPRIMIDO
000539	VÁLVULA MEDICINAL NIPLE P/ POSTO DE ÓXIDO NITROSO (N2O)
000541	VÁLVULA MEDICINAL NIPLE P/ POSTO DE VÁCUO
001818	VÁLVULA MEDICINAL NIPLE P/ POSTO NITROGÊNIO
005071	VÁLVULA MEDICINAL PARA CO2 (GÁS CARBÔNICO)
001698	PINO DE IMPACTO C/ MOLA P/ NIPLES

RMS: 81284390012




Kits Reposição Para Posto Parade



Código	Descrição do produto	Código	Descrição do produto
000083	CANOPLA EXTERNA P/ POSTO AR COMPRIMIDO	000079	CANOPLA INTERNA P/ POSTO AR COMPRIMIDO
005074	CANOPLA EXTERNA P/POSTO GÁS CARBÔNICO CO2	000081	CANOPLA INTERNA P/ POSTO OXIDO NITROSO N2O
000085	CANOPLA EXTERNA P/POSTO OXIDO NITROSO N2O	000078	CANOPLA INTERNA P/ POSTO OXIGÊNIO O2
000082	CANOPLA EXTERNA P/POSTO OXIGÊNIO O2	005075	CANOPLA INTERNA P/POSTO GÁS CARBÔNICO CO2
000084	CANOPLA EXTERNA P/POSTO VÁCUO	000080	CANOPLA INTERNA P/POSTO VÁCUO
003069	CANOPLA EXTERNA POSTO P/ NITROGÊNIO	003070	CANOPLA INTERNA POSTO P/ NITROGÊNIO

RMS: 81284390012

Kits Reposição Para Posto Parade

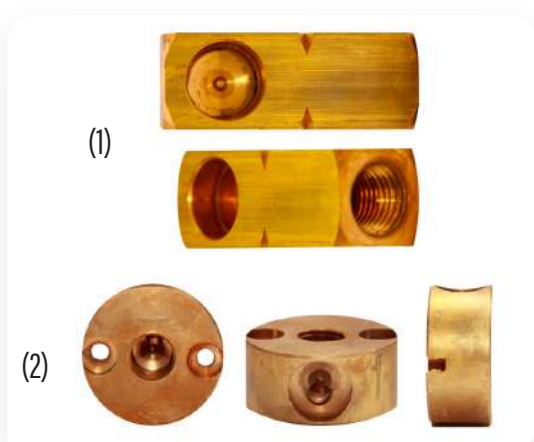


Código	Descrição do produto
R06437	KIT 5 PEÇAS TARUGO INTERNO (1)
R06438	KIT 5 PEÇAS TARUGO EXTERNO (2)

RMS: 81284390012

Traqueias em Silicone

As traquéias em silicone da marca ROMED, são autoclaváveis e indicadas para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais.

- » Fácil Manuseio
- » Excelente flexibilidade
- » Silicone medicinal
- » Isento de látex

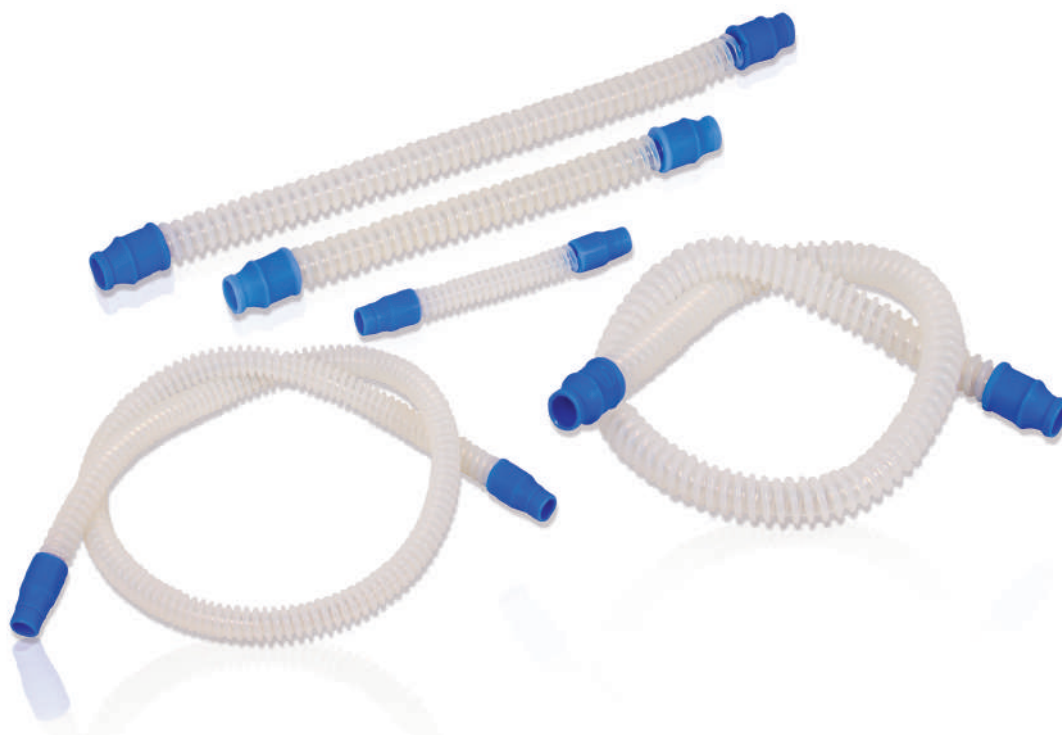


Código	Descrição do produto
R04067	TRAQUEIA SILICONE 15X300 MM
R04068	TRAQUEIA SILICONE 15X400 MM
R04069	TRAQUEIA SILICONE 15X600 MM
R04071	TRAQUEIA SILICONE 15X1200 MM
R04072	TRAQUEIA SILICONE 15X1600 MM
R04073	TRAQUEIA SILICONE 15X1800 MM
R04074	TRAQUEIA SILICONE 15X2000 MM
RMS: 81284390010	

Código	Descrição do produto
R04075	TRAQUEIA SILICONE 22X400 MM
R04076	TRAQUEIA SILICONE 22X600 MM
R04096	TRAQUEIA SILICONE 22X800 MM
R04080	TRAQUEIA SILICONE 22X1200 MM
R04084	TRAQUEIA SILICONE 22X1500 MM
R04081	TRAQUEIA SILICONE 22X1600 MM
R04082	TRAQUEIA SILICONE 22X1800 MM
R04085	TRAQUEIA SILICONE 22X2000 MM
R04083	TRAQUEIA SILICONE 22X2500 MM
RMS: 81284390010	

Traqueias em Silicone Premium

Descrição

Traqueia Confeccionada em silicone translúcido, autoclavável a 134°, Possui superfície externa em elipse e superfície interna lisa para evitar acúmulo de resíduos e umidade. Indicada para composição de circuitos respiratórios e de anestesia e para macronebulizador.

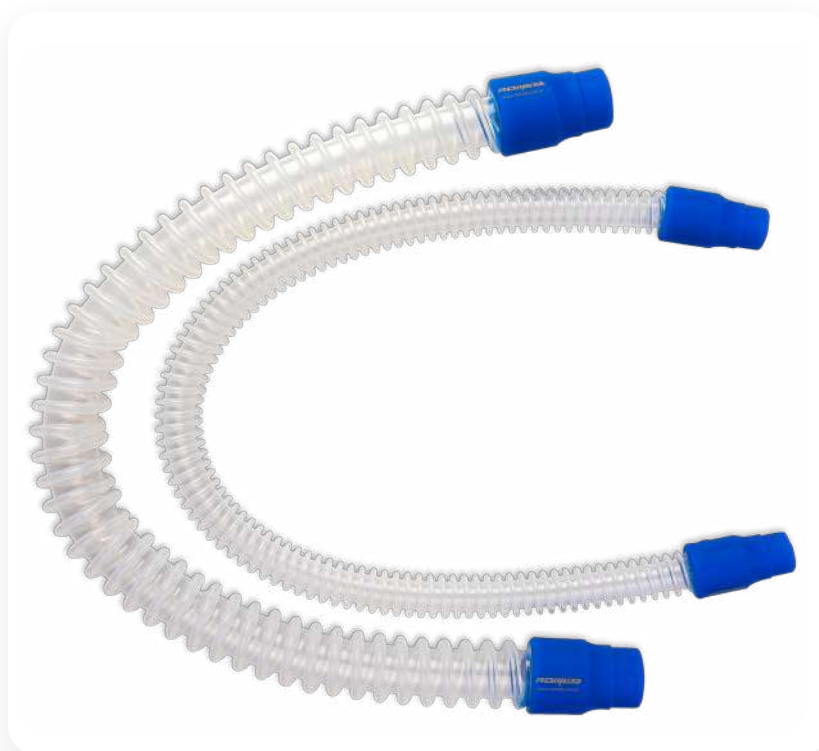

ADULTO

Código	Descrição do produto
R06390	TRAQUEIA SILICONE 22X1200 MM PREMIUM
R06391	TRAQUEIA SILICONE 22X1500 MM PREMIUM
R06392	TRAQUEIA SILICONE 22X1600 MM PREMIUM
R06393	TRAQUEIA SILICONE 22X1800 MM PREMIUM
R06395	TRAQUEIA SILICONE 22X400 MM PREMIUM
R06396	TRAQUEIA SILICONE 22X600 MM PREMIUM
R06397	TRAQUEIA SILICONE 22X800 MM PREMIUM
RMS: 81284390010	

INFANTIL/NEONATAL

Código	Descrição do produto
R06398	TRAQUEIA SILICONE 15X300 MM PREMIUM
R06399	TRAQUEIA SILICONE 15X400 MM PREMIUM
R06400	TRAQUEIA SILICONE 15X600 MM PREMIUM
R06394	TRAQUEIA SILICONE 15X1200 MM PREMIUM
R06401	TRAQUEIA SILICONE 15X1600 MM PREMIUM
R06402	TRAQUEIA SILICONE 15X1800 MM PREMIUM
RMS: 81284390010	

Consulte outras medidas através do nosso site www.romed.com.br

Espaço Morto em Silicone



Código

Descrição do produto

001579

ESPAÇO MORTO (TRAQ,SILICONE) 30 CM 22MX22F

RMS: 81284390010



Código

Descrição do produto

001578

ESPAÇO MORTO (TRAQ,SILICONE) 30 CM 15MX15F

RMS: 81284390010



Código

Descrição do produto

R01252

ESPAÇO MORTO (TRAQ,SILICONE) 15 CM 15MX19M

RMS: 81284390010



Código

Descrição do produto

006149

ESPAÇO MORTO (TRAQ,SILICONE) 15 CM 15MX22F

RMS: 81284390010

Espaço Morto em Silicone




Código

Descrição do produto

000888

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 15CM 15MX15F

RMS: 81284390010

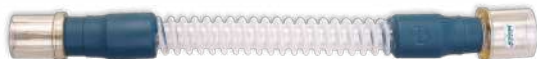

Código

Descrição do produto

000889

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 15 CM 22MX22F

RMS: 81284390010



Código

Descrição do produto

R01251

ESPAÇO MORTO(TRAQ.SIL.)15 CM 15MX22M COTOVELO C/FURO

RMS: 81284390010



Código

Descrição do produto

R06305

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 15CM 15MX15M

RMS: 81284390010

Espaço Morto em Silicone




Código

002145

RMS: 81284390010

Descrição do produto

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 20 CM 15MX15F

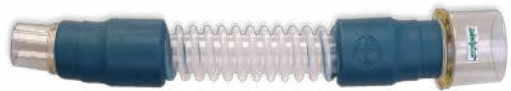

Código

006150

RMS: 81284390010

Descrição do produto

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 20 CM 15MX22F



Código

006215

RMS: 81284390010

Descrição do produto

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 20 CM 22M X 22F



Código

001579

RMS: 81284390010

Descrição do produto

ESPAÇO MORTO (TRAQ.SILICONE) 30 CM 22MX22F

Jarra para Umidificação

Descrição

A Jarra de Umidificação é um umidificador composto basicamente de um copo em termoplástico com capacidade de 250 ml, que apresenta em sua parte superior uma conexão de entrada, identificada com a inscrição "IN" para conectar o tubo com o fluxo de gás proveniente do respirador e uma conexão de saída, identificada com a inscrição "OUT" para conectar o tubo que irá conduzir o gás umidificado para o paciente. Em sua parte inferior, apresenta base de alumínio, que ao entrar em contato com o aquecedor, recebe calor promovendo o aquecimento da água no interior da jarra.

Finalidade

A Jarra de Umidificação é um produto destinado a promover o aquecimento dos gases e consequentemente a umidificação de vias aéreas do paciente, quando utilizado juntamente com um equipamento aquecedor. Aplica-se em situações onde as vias aéreas superiores não são utilizadas, por exemplo, no paciente entubado que durante a ventilação mecânica, necessita que a função da nasofaringe e traqueia seja duplicada.



Características

- » Copo Polissulfona (PC) Autoclavável 121° ou 134°C;
- » Anel de vedação (Oring) em silicone;
- » Tampão em silicone;
- » Base em alumínio.

Especificações Técnicas

- » Capacidade de água: 250ml
- » Fluxo de trabalho: 180l/min

Código

Descrição do produto

RO263

JARRA P/ UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA (INTER)

RMS: 81284390003

Fio Guia Mandril

Guia de Intubação (Mandril)


A Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento onde o médico, com um Laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz o tubo na traqueia. O tubo endotraqueal será utilizado para auxiliar na ventilação do paciente, pois possibilita que seja alcançada o funcionamento dos pulmões.

Descrição

O mandril para intubação, também conhecido como fio guia, é confeccionado em cobre flexível cromado proporcionando formato e resistência adequados para facilitar a intubação. Possui esfera na extremidade distal que impede a ocorrência de trauma durante o procedimento. Opcionalmente pode ser utilizado o botão regulador na haste do mandril, posicionando no comprimento desejado.

Finalidade

Indicado para auxiliar a introdução da sonda em procedimentos de intubação e/ou procedimentos médico-hospitalares similares

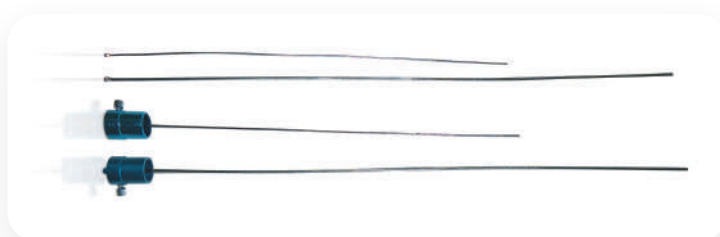

Código

Descrição do produto

R0326

FIO GUIA MANDRIL S/BOTÃO ADULTO

R0327

FIO GUIA MANDRIL S/BOTÃO INFANTIL

R0328

FIO GUIA MANDRIL C/BOTÃO ADULTO

R0329

FIO GUIA MANDRIL C/BOTÃO INFANTIL

RMS: 81284390002

Kit Reposição Circuito Baraka

Código

Descrição do produto

R06284

KIT C/ TRAQUEIA SILICONE E CONECTORES PC P/ BARAKA (1)

RMS: 81284390016



Código

Descrição do produto

R06281

KIT C/ TRAQUEIA SILICONE E CONECTORES PS P/ BARAKA (2)

RMS: 81284390004



Circuito Paciente para Ventilação/Anestesia

Descrição

Os Circuitos Respiratórios em silicone fabricados pela Romed. São compostos por conectores intermediários, dreno coletor de condensação, tubo proximal e traqueias em silicone com parte externa em elipse e parte interna lisa. A padronização das conexões e acessórios, garante total compatibilidade com os mais diversos equipamentos existentes do mercado. Pode-se utilizar em conjunto com a jarra de umidificação aquecida.

Finalidade

Responsável por conduzir um fluxo de gases, os circuitos ventilatórios, também conhecidos como Circuito Paciente, são utilizados nos "respiradores pulmonares" ventiladores de UTI e aparelhos de anestesia. São eles que conduzem os suprimentos de fluxo ventilatório e gases anestésicos para o paciente garantindo assim a manutenção respiratória durante o procedimento, seja ele de curto ou longo prazo.



Código	Descrição do produto
R0139	CIRCUITO PACIENTE VENTILAÇÃO SILICONE ADULTO INT.5
R0140	CIRCUITO PACIENTE VENTILAÇÃO SIL INF/NEO INT3 OU 5
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
001659	CIRCUITO PACIENTE VENTILAÇÃO SIL.AD.DXT
002843	CIRCUITO PACIENTE VENTILAÇÃO SILICONE INF/NEO DXT
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
001083	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1200 MM ADULTO
001082	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1200 MM INF/NEO
005094	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1500 MM ADULTO
R0168	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1600 MM ADULTO
005015	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1600 MM INF/NEO
004770	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1800 MM ADULTO
R0192	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 1800 MM INF/NEO
005093	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 2000 MM ADULTO
R0177	CIRCUITO PACIENTE ANESTESIA SILICONE 2200 MM INF/NEO
RMS: 81284390003	

**Código****Descrição do produto**

R0187

CIRCUITO PAC.SIL C/3 TRAQ.1200MM COMP.GE/TAKAOKA ADULTO

RMS: 81284390003

**Código****Descrição do produto**

R0190

CIRCUITO PAC.ANESTESIA SIL 1200 MM AD C/ Y C/FURO

RMS: 81284390003

**Código****Descrição do produto**

R0191

CIRCUITO VLP 2000 TRAQUEIA SILICONE 22X600MM C/ VÁLVULA

RMS: 81284390003



Código	Descrição do produto
004797	CIRCUITO SILICONE ADULTO COMP.DRAGER MOD.FABIUS
RMS: 81284390003	

Código	Descrição do produto
R0161	CIRCUITO EXPANSÍVEL P/ ANESTESIA SILICONE ADULTO
R0162	CIRCUITO EXPANSÍVEL P/ ANESTESIA SILICONE PEDIÁTRICO
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
004798	CIRCUITO SILICONE INF/NEO COMP. DRAGER MOD.FABIUS
RMS: 81284390003	



Código

R0195

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CIRCUITO RESPIRATÓRIO SIL 22X1600 MM C/PROXIMAL AD.

Código

R0196

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CIRCUITO RESPIRATÓRIO SILICONE 15X1600 MM C/PROXIMAL INF/NEO



Código

R0193

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CIRCUITO RESPIRATÓRIO AD 1200MM C/PROXIMAL S/DRENO

Código

R0196

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CIRCUITO RESPIRATÓRIO SILICONE 15X1600 MM C/PROXIMAL INF/NEO





Dreno Coletor de água

O Dreno coletor de água é indicado para uso na conexão de traqueias usadas em circuitos respiratórios com objetivo de drenar a umidade existente no circuito.

Código	Descrição do produto
R0210	DRENO COLETOR DE ÁGUA PC
RMS: 81284390003	

Tubo Proximal

Código	Descrição do produto
R04129	TUBO PROXIMAL 1,6 M SILICONE P/CIRCUITOS C/ L FINO
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
R0164	CIRCUITO SILICONE BIPAP C/ VÁLVULA EXALAÇÃO ADULTO
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
004519	CIRCUITO COMPATÍVEL OXYLOG ADULTO SEM VÁLVULA
004520	CIRCUITO COMPATÍVEL OXYLOG INFANTIL SEM VÁLVULA
RMS: 81284390003	

Consulte modelos compatíveis, com qualquer marca nacional ou importada em nosso site.



Nebulizador em T para circuitos

Descrição

O nebulizador fornece uma entrega fácil e rápida da droga do aerossol sem quebrar o ciclo do circuito ventilatório durante a ventilação mecânica, entrega a droga do aerossol aos pacientes ventilados sem ter que abrir o circuito do ventilador.

De encaixe UNIVERSAL, o nebulizador T se adapta em qualquer extensão existente atualmente no mercado.

Extensão em PVC atóxico de 2 Metros.

- » Opções para encaixes das extensões:
- » Extensão com ponteira lisa para encaixe;
- » Extensão com ponteira de rosca Ø2.



Código

R04994

RMS:81284399002

Descrição do produto

NEBULIZADOR T P/ CIRCUITO C/ 2 EXTENSÕES BICO/O2

Código

R04992

RMS: 81284399002

Descrição do produto

NEBULIZADOR T P/ CIRCUITO C/ 1 EXTENSÃO P/ BICO



Código

R04993

RMS:81284399002

Descrição do produto

NEBULIZADOR T P/ CIRCUITO C/ 1 EXTENSÃO P/ O2

Circuito Anestesia Baraka Silicone

Descrição

Os circuitos de anestesia Baraka em silicone fabricados pela Romed, são totalmente autoclaváveis a 134°C e são compostos por balão respiratório em silicone, traqueia em silicone translúcido autoclavável ou válvula unidirecional, conectores intermediários confeccionados em policarbonato, material resistente a altas temperaturas e 100% autoclavável.

Finalidade

O Circuito de Anestesia Baraka tem como finalidade promover a ventilação artificial facial não invasiva durante a indução ou recuperação anestésica, facilitando a administração de gases anestésicos manualmente para o paciente.



Código	Descrição do produto
R06031	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L SILICONE TRAQ.M.1
RMS: 81284390016	



Código	Descrição do produto
R06032	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L SIL.V.UNIDIR M.5
RMS: 81284390015	



Código	Descrição do produto
R06061	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2,3L SIL.V.UNIDIR M.5
RMS: 81284390015	



Código

Descrição do produto

R06050

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L SILICONE TRAQ.M.3

RMS:81284390016

Código

Descrição do produto

000461

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L SIL.V.UNIDIR M.5 INFLAV.

RMS: 81284390015



Circuito Anestesia Baraka Silicone 1 L

Código

Descrição do produto

001937

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L SIL.T.M.3 INFLAV.

RMS: 81284390016



Circuito Anestesia Baraka Silicone c/ Válvula Unidirecional Sem Máscara

Código	Descrição do produto
R05912	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2,3L SILICONE V.UNID SEM MÁSCARA
RMS: 81284390015	

Opções de Máscaras nas Páginas 14 e 15

Circuito Anestesia Baraka Silicone c/ Traqueia Sem Máscara

Código	Descrição do produto
R05994	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L SILICONE SEM MÁSCARA
R05995	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L SILICONE SEM MÁSCARA
R05996	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L SILICONE SEM MÁSCARA
R05997	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2,3L SILICONE SEM MÁSCARA
R05998	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L SILICONE SEM MÁSCARA
RMS: 81284390016	

Opções de Máscaras nas Páginas 14 e 15



Válvula Superior Baraka Unidirecional

Código	Descrição do produto
R05096	VÁLVULA SUPERIOR BARAKA UNIDIRECIONAL
RMS: 81284390015	

Circuito Anestesia Baraka Silicone C/Traqueia e Válvula Unidirecional



Código

Descrição do produto

R06946

CIRCUITO BARAKA 1L SIL C/ TRAQUEIA E VÁLVULA UNIDIRECIONAL MÁSC 3

RMS: 81284390015

Descrição

O Circuito Anestesia Baraka tem como objetivo promover a ventilação artificial não invasiva durante a indução ou recuperação anestésica, facilitando a administração de gases anestésicos manualmente para o paciente.



Código

Descrição do produto

R06945

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L SIL C/ TRAQ E VÁLV UNIDIRECIONAL MÁSC 5

RMS: 81284390015

Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Válvula Unidirecional

Descrição

O Circuito para Anestesia Baraka fabricado pela Romed possui dois modelos (com válvula unidirecional ou traqueia em silicone) e diversas configurações com diferentes tamanhos de máscaras faciais e balões respiratórios. Todos os modelos possuem em sua composição o balão respiratório látex free.

Finalidade

O Circuito de Anestesia Baraka tem como finalidade promover a ventilação artificial facial não invasiva durante a indução ou recuperação anestésica, facilitando a administração de gases anestésicos manualmente para o paciente.



Código

Descrição do produto

R06060

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 5L M.4 PVC

RMS:81284390004

Circuito Anestesia Baraka c/ Traqueia

Código

Descrição do produto

R06021

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L TRAQ.SIL. M.SIL.3

RMS: 81284390004





Circuito Anestesia Baraka Latex Free C/ Traqueia e Válvula

Código

Descrição do produto

R06948

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L C/ TRAQ E VÁLV UNIDIRECIONAL MÁSC 3

RMS: 81284390004



Código

Descrição do produto

R06947

CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L C/ TRAQ E VÁLV UNIDIRECIONAL MÁSC 5

RMS: 81284390004



Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Traqueia Silicone Sem Máscara

Código	Descrição do produto
R06037	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L C/ TRAQ.SIL. S/ MÁSCARA
R06038	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L C/ TRAQ.SIL. S/ MÁSCARA
R06039	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L C/ TRAQ.SIL. S/ MÁSCARA
R06040	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L C/ TRAQ.SIL. S/ MÁSCARA
R06041	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 5L C/ TRAQ.SIL. S/ MÁSCARA

RMS: 81284390004

Opções de Máscaras nas Páginas 14 e 15.

Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Válvula

Código	Descrição do produto
R06029	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 5L M.SIL.5

RMS:81284390004



Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Válvula Unidirecional

Código	Descrição do produto
R06059	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 3L M.4 PVC

RMS: 81284390004



Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Válvula Unidirecional

Código	Descrição do produto
R06028	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 3L M.SIL.5
RMS:81284390004	

Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Válvula Unidirecional Sem Máscara

Código	Descrição do produto
R06042	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L (UNIDIR) S/ MÁSCARA
R06043	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L (UNIDIR) S/ MÁSCARA
R06044	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L (UNIDIR) S/ MÁSCARA
R06045	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L (UNIDIR) S/ MÁSCARA
R06046	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 5L (UNIDIR) S/ MÁSCARA
RMS: 81284390004	

Opções de Máscaras nas Páginas 14 e 15.



Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Válvula



Código	Descrição do produto
R06025	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 1/2L M.SIL.1
R06026	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 1L M.SIL.3
R06272	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 2L M.SIL.3
R06027	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 2L M.SIL.4
R06300	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA UNIDIR 3L MASC SIL.3
R06273	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 3L M.SIL.4
R06028	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 3L M.SIL.5
R06029	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA V.UNIDIR 5L M.SIL.5
RMS: 81284390004	

Circuito Anestesia Baraka Latex Free c/ Traqueia

Código	Descrição do produto
R06030	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L TRAQ.SIL. M.SIL.1
R06275	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L TRAQ.SIL.M.SIL.2
R06274	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L TRAQ.SIL.M.SIL.1
R06021	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L TRAQ.SIL. M.SIL.3
R06066	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L TRAQ.SIL. M.SIL.2
R06022	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L TRAQ.SIL. M.SIL.4
R06276	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L TRAQ.SIL.M.SIL.3
R06023	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 3L TRAQ.SIL. M.SIL.5
R06024	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 5L TRAQ.SIL. M.SIL.5
RMS: 81284390004	



Código	Descrição do produto
R06052	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1L TRAQ.SIL.M.3 PVC
RMS: 81284390004	

Balão Respiratório Latex Free

Descrição

Os balões respiratórios Romed são confeccionados em borracha de Neoprene (policloropreno) totalmente isentos de látex. Fabricados sob conceitos internacionais de tecnologia e qualidade, o que garante que em sua composição não existem materiais que possam causar alergias ao paciente ou riscos de deterioração e contaminação no contato com gases.

Finalidade

O balão respiratório látex free é utilizado em carrinhos de anestesia e circuitos ventilatórios, armazenando grandes quantidades de gases para reinalação e servindo de suporte para ventilação manual, antes ou após os procedimentos.

Código	Descrição do produto
R04678	BALÃO RESPIRATÓRIO BORRACHA 1/2L
R04679	BALÃO RESPIRATÓRIO BORRACHA 1L
R04680	BALÃO RESPIRATÓRIO BORRACHA 2L
R04681	BALÃO RESPIRATÓRIO BORRACHA 3L
R04682	BALÃO RESPIRATÓRIO BORRACHA 5L
RMS: 81284390004	

Características

- » Balão confeccionado em policloropreno;
- » Disponível nos tamanhos: 1/2, 1, 2, 3 ou 5 litros;
- » Hipoalergênico;
- » Possui ótima resiliência;
- » Resistente a fadiga por flexão;
- » Conector (bucha flexível) - Conexão com 22mm conforme norma ABNT NBR ISO 5356.

Produtos Relacionados

- » Circuito de anestesia Baraka



Balão Respiratório C/ Laço Silicone

Descrição

Os balões respiratórios são confeccionados em silicone translúcido, autoclavável.

Finalidade

O balão de silicone é utilizado em carrinhos de anestesia e circuitos ventilatórios, armazenando grandes quantidades de gases para reinalação e servindo de suporte para ventilação manual, antes ou após os procedimentos. Pode-se utilizar também como reservatório dos reanimadores manuais Romed.

Características

- » Balão confeccionado em silicone autoclavável 134°C;
- » Disponível nos tamanhos: 1/2, 1, 2, 2,3 e 3 litros.

Produtos Relacionados

- » Reanimador Plus
- » Circuito de anestesia Baraka



Código	Descrição do produto
R04057	BALÃO RESPIRATÓRIO C/LAÇO SILICONE 1/2L
R04058	BALAO RESPIRATÓRIO C/LAÇO SILICONE 1L
R04059	BALAO RESPIRATÓRIO C/LAÇO SILICONE 2L
R04060	BALAO RESPIRATÓRIO C/LAÇO SILICONE 2,3L
R04061	BALÃO RESPIRATÓRIO C/LAÇO SILICONE 3L
RMS: 81284390007	

Pulmão Teste em PVC

Código	Descrição do produto
000410	PULMÃO TESTE PVC ADULTO 500 ML
000411	PULMÃO TESTE PVC INF/NEO 50 ML
RMS: 81284390004	



Válvula Unidirecional

Descrição

A Válvula Unidirecional permite ventilação espontânea ou controlada, manual ou mecânica, com diafragma que impede a reinalação de gases.

Por ser uma válvula unidirecional com resistência expiratória, tem aplicação segura e eficaz em diversas manobras de abertura pulmonar (aumento da complacência pulmonar e torácica).



Código

R01744

RMS: 81284390015

Descrição do produto

VÁLVULA UNIDIRECIONAL P/ ANESTESIA/BARAKA PSU

Válvula Unidirecional C/ T de Ayres

Código

R04709

RMS: 81284390015

Descrição do produto

VÁLVULA UNIDIRECIONAL PSU P/BARAKA C/T AYRES PC



Válvula Superior Unidirecional



Código

R01745

RMS: 81284390004

Descrição do produto

VÁLVULA UNIDIRECIONAL P/ANESTESIA/BARAKA PC

Válvula Unidirecional c/ T de Ayres

Código

R04707

RMS: 81284390004

Descrição do produto

VÁLVULA UNIDIRECIONAL PC P/BARAKA C/T AYRES PS



Conectores Intermediários



Código	Descrição do produto
R04112	CONECTOR COTOVELO 22MX22F 90° PC
RMS: 81284390003	

Código	Descrição do produto
R04108	CONECTOR T AIRES PC 22MX22FX26M
RMS: 81284390015	



Código	Descrição do produto
R04109	CONECTOR T AIRES PC 15MX15FX22M
RMS: 81284390016	

Código	Descrição do produto
R04116	CONECTOR COTOVELO PC 22MX15MX15F
RMS: 81284390016	



Código	Descrição do produto
R04177	CONECTOR COTOVELO PC 22X15X90° C/ FURO LOCK
RMS: 81284390016	

Conectores Intermediarios

**Código**

R04114

RMS:81284390003

Descrição do produto

CONECTOR T 22MX15FX22F PC

Código

R04115

RMS:81284390003

Descrição do produto

CONECTOR T 15FX22MX15F PC

**Código**

R04113

RMS:81284390003

Descrição do produto

CONECTOR T 22MX22MX22F PC

Código

000559

RMS:81284390003

Descrição do produto

VÁLVULA EXALAÇÃO P/ CIRCUITO PC



Conectores Intermediários


Código
Descrição do produto

R04187

CONECTOR T C/ VÁLVULA UNIDIRECIONAL 22MX22F

RMS: 81284390003

Código
Descrição do produto

R04211

CONECTOR T C/ VÁLVULA UNIDIRECIONAL 22MX15F

RMS: 81284390003


Código
Descrição do produto

R04064

CONECTOR T AIRES PP 22MX22FX26M

RMS: 81284390004

Código
Descrição do produto

R04065

CONECTOR T AIRES PP 15MX15FX22M

RMS: 81284390004


Código
Descrição do produto

R04066

CONECTOR COTOVELO PP 22MX15MX15F

RMS: 81284390004

Conectores Intermediarios



Código

R04182

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CONECTOR Y 90° SAÍDA LOCK C/ PINO METAL

Código

R04181

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CONECTOR Y 90° SAÍDA C/ LOCK GIRATÓRIO



Código

R04185

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CONECTOR Y INF. PC 15X15X22MM



Código

R04119

RMS: 81284390003

Descrição do produto

CONECTOR Y ADULTO S/FURO PC



Conectores Intermediarios



Código **Descrição do produto**

R04120 CONECTOR Y ADULTO C/ FURO PC

RMS: 81284390003

Código **Descrição do produto**

R04124 CONECTOR Y 90° 22MX15FX22M PC

RMS: 81284390003



Código **Descrição do produto**

R04209 CONECTOR Y INF PC S/ FURO

RMS: 81284390003

Código **Descrição do produto**

R04208 CONECTOR Y INF PC C/ FURO C/ TAMPÃO

RMS: 81284390003



Conectores Intermediarios



Código

Descrição do produto

R04121

CONECTOR Y INFANTIL C/ FURO PC

RMS: 81284390003

Código

Descrição do produto

R04122

CONECTOR Y INFANTIL S/ FURO PC

RMS: 81284390003



Código

Descrição do produto

R03849

CONECTOR Y RETO INF/NEO PC C/ FURO LOCK

RMS: 81284390003



Código

Descrição do produto

R04202

CONECTOR Y RETO 22MX15F PC

RMS: 81284390003



Conectores Intermediarios


Código
Descrição do produto

R03730

CONECTOR Y ADULTO PC C/ FURO C/ TAMPÃO SILICONE

RMS: 81284390003

Código
Descrição do produto

R03847

CONECTOR Y ADULTO PC S/ FURO

RMS: 81284390003


Código
Descrição do produto

R03848

CONECTOR Y RETO ADULTO PC C/ FURO LOCK

RMS: 81284390003


Código
Descrição do produto

R04118

CONECTOR RETO P/ TUBO PROXIMAL PC

RMS: 81284390003



Conectores Intermediarios

**Código****Descrição do produto**

R04132

CONECTOR RETO PC 19MX15FX15M

RMS: 81284390003

Código**Descrição do produto**

R04111

CONECTOR RETO TRAQ UNIÃO PC 15MX15M

RMS: 81284390003

**Código****Descrição do produto**

R04110

CONECTOR RETO TRAQ UNIÃO PC 22MX22M

RMS: 81284390003

Código**Descrição do produto**

R04137

CONECTOR RETO 22X15MM PC

RMS: 81284390003



Conectores Intermediarios



Código	Descrição do produto
R04123	CONECTOR TRAQ,INF.DE SILIC.15M
RMS: 81284390003	

Código	Descrição do produto
R04136	CONECTOR RETO 22MX13MM PC
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
R04131	CONECTOR RETO PC 15MX13FX13M
RMS: 81284390003	

Código	Descrição do produto
R04133	CONECTOR RETO PC 22MX15F
RMS: 81284390003	



Conectores Intermediários



Código	Descrição do produto
R04135	CONECTOR RETO PC 22FX19M
RMS: 81284390003	

Código	Descrição do produto
R04130	CONECTOR RETO PC 15FX19MX13M
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
R04126	CONECTOR RETO PC 22MX22F
RMS: 81284390003	



Código	Descrição do produto
R04128	CONECTOR RETO PC 22FX15M
RMS: 81284390003	



Conectores Intermediarios


Código
Descrição do produto

R04134

CONECTOR RETO PC TRAQUEIA INFANTIL SILICONE 22MX15F

RMS: 81284390003

Código
Descrição do produto

R04127

CONECTOR RETO PC P/TRAQ.SIL.INF.22FX15M

RMS: 81284390003


Código
Descrição do produto

R04183

CONECTOR L 90° P/TUBO PROXIMAL FINO

RMS: 81284390003

Código
Descrição do produto

R04117

CONECTOR L 90° P/TUBO PROXIMAL PC

RMS: 81284390003



Frasco Para Aspiração



Descrição

Os Frascos para Aspiração Romed foram desenvolvidos para uso em equipamentos de aspiração, realizando a coleta de secreção durante o procedimento médico-hospitalar.

Código	Descrição do produto
R05109	FRASCO PVC GRADUADO 500 ML
RMS: 81284390019	

Frasco e Suporte

Código	Descrição do produto
R0205	FRASCO VD 3L C/TAMPA E SUPORTE RODÍZIOS
R0206	FRASCO VD 5L C/TAMPA E SUPORTE RODÍZIOS
R0463	SUPORTE P/FRASCO 3 OU 5L C/RODÍZIOS
RMS: 81284390005	



Frasco de Vidro



Código

Descrição do produto

R0251 FRASCO VIDRO 1/2L GRADUADO

R0252 FRASCO VIDRO 3L SEM TAMPA

R0253 FRASCO VIDRO 5L SEM TAMPA

R0254 FRASCO VIDRO 3L C/ TAMPA

R0255 FRASCO VIDRO 5L C/ TAMPA

R06259 TAMPA BORRACHA P/ FRASCO VIDRO 3 OU 5L

RMS: 81284390005

Kit Boia P/ Tampa Frasco 3/5L e Aspirador

Código

Descrição do produto

R0265 KIT BOIA P/ TAMPA FRASCO 3/5L E ASPIRADOR

RMS: 81284390005



Frasco para Aspiração 3L policarbonato

Código

Descrição do produto

R0256 FRASCO P/ASPIRAÇÃO 3 LITROS PC C/TAMPA

RMS: 81284390005



Distribuidor / Respresentante autorizado.

www.romed.com.br
(11) 3718-1000

Crefito
Nº 7536 - SP
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AFE Nº 8.12.843-9

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965
Rua Major Vieira, 130 Jardim Lambreta - Cotia - S.P. CEP 06710-680

